

# Rotadorm Care

## Das klassische Aufstehbett

Max.  
Patienten-  
gewicht  
135 kg

Sichere  
Arbeitslast  
175 kg

In 3 Längen:  
200, 210 und  
220 cm

Drehrichtung  
beidseitig  
möglich

Höhen-  
verstellbereich  
40 - 80 cm



◀ Die Positionen der einzelnen Elemente der Liegefläche können bei der Rotadorm-Bettenserie einzeln auf die Bedürfnisse der Patienten eingestellt und programmiert werden.

Ein stabiler Patientenaufrichter und der verstellbare ergonomische Handgriff sind bei unseren Aufstehbetten in der Standardausführung enthalten.


Das **Rotadorm Care** ist das bewährte Pflegebett mit integrierter Aufstehfunktion von ISKMed. Mit seiner hohen Funktionalität bringt dieses eingetragene Hilfsmittel sowohl den Patienten als auch den Pflegenden Unterstützung und Erleichterung im Alltag.

## Produktdetails

- | 85 cm breite Liegefläche, in 3 Längen lieferbar
- | Höhe, Kopfteil, Nackenteil, Oberschenkelauflage, Unterschenkelauflage und Drehmechanismus einzeln elektronisch einstellbar
- | 2-geteilte Spezialmatratze mit Inkontinenzbezug
- | Patientenaufrichter mit Handgriff
- | Abnehmbare Patienten-Handgriffe
- | Seitengitter mit Funktionssperrung
- | Programmier- und Patientenhandbedienung
- | Stabiles Scherenhubsystem zur Höhenverstellung

| **Hilfsmittelnummern:**  
**19.40.01.8003 Krankenkasse**  
**50.45.01.4003 Pflegekasse**

# Produktbilder

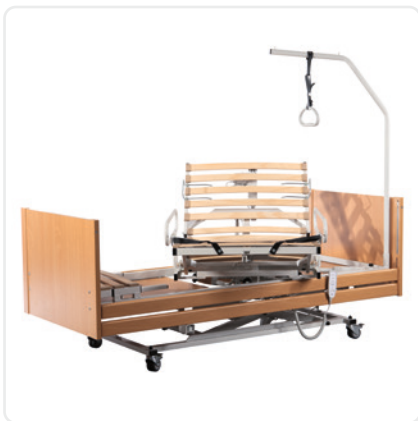

Spezialbetten

Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung des Aufstehbettes. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch einen zusätzlichen Tisch. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung ☒.

## Technische Daten

- | Matratzenbreite: 85 cm
- | Matratzenlänge: 200 / 210 / 220 cm
- | Betthöhe: 40 – 80 cm
- | Max. Patientengewicht: 135 kg
- | Sichere Arbeitslast: 175 kg

## Extra Ausstattung / Optionales

- | Liegeflächenabmessung: 85 x 200 cm (SI-011-1)
- | Liegeflächenabmessung: 85 x 210 cm (SI-011-21)
- | Liegeflächenabmessung: 85 x 220 cm (SI-011-22)
- | Drehrichtung: links
- | Drehrichtung: rechts
- | **Zuggriff (SI-011.85.307)**  
dient als Positionierungshilfe im Bett, wird am Kopfteil montiert
- | **Abdeckung für Handgriff-Aufnahme (SI-011.80.725)**  
ermöglicht ein seitliches Aussteigen aus dem Bett
- | **Tisch (SI-132-0)**  
dient als Ablagemöglichkeit während der Sitzposition, Montage an Haltegriff über Drahtgestell, Abmessung: 365 x 265 x 10 mm
- | **Transportgestell (TRANSP-08)**  
zur Unterstützung beim Transport, Kautions 300 €
- | **Akku-Pack mit Ladekreislauf (SI-011.85.050)**  
Sicherheitsausstattung für Stromausfall – alle elektrischen Funktionen können somit auch ohne Netzspannung in die Ausgangsposition zurückgefahren werden