

Rotadorm Max / Max Low

Das Aufstehbett für adipöse Patienten


Max.
Patienten-
gewicht
180 kg

Sichere
Arbeitslast
220 kg

3 Längen
einstellbar:
200, 210 und
220 cm

Höhen-
verstellbereich
34 - 78 cm oder
40 - 80 cm

Drehrichtung
beidseitig
möglich

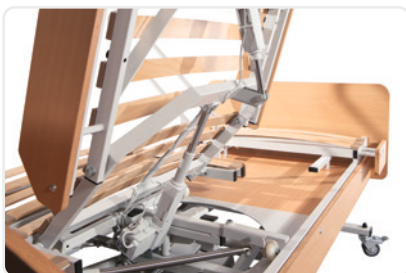

◀ Die autark steuerbare Nackenstütze sorgt für mehr Sitz- und Liegekomfort und kann den Aufstehvorgang ergonomisch unterstützen (Bild links).

◀ Seitenverkleidungen in Buche-Optik sorgen für ein behaglich-wohnliches Ambiente.

Die Maxi-Version unserer **Rotadorm-Bettenserie** bietet adipösen Patienten Stabilität im Alltag, ob im Schlaf oder beim Aufstehvorgang. Für Personen mit einer Körpergröße unter 165 cm ist die Low-Variante optimal geeignet.

Produktdetails

- | 100 cm breite Liegefläche, auf 3 Längen einstellbar
- | Höhe, Kopfteil, Nackenteil, Oberschenkelauflage, Unterschenkelauflage und Drehmechanismus einzeln elektronisch einstellbar
- | 2-geteilte Schwerlastmatratze mit Inkontinenzbezug
- | Patientenaufrichter mit Handgriff
- | Abnehmbare Patienten-Handgriffe
- | Programmier- und Patientenhandbedienung
- | Optional mit Batteriesystem zur autarken Nutzung aller Funktionen
- | Stabiles Scherenhubsystem zur Höhenverstellung
- | Einzeln gebremste Doppellenkrollen
- | Notentriegelung für Drehmechanismus bei Rotadorm Max Low

Produktbilder



Max Low



Max Low



Max Low



Max Low



Max Low

Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen sowohl die Ausführung des Rotadorm Max in der Version mit einem Höhenverstellbereich von 40 – 80 cm, als auch die Version Max Low (Bilder sind entsprechend gekennzeichnet) mit einem Höhenverstellbereich von 34 – 78 cm. Zudem sehen Sie auf den Bildern die Version des Rotadorm Max mit Matratze sowohl mit als auch ohne weißen Überzug (der Überzug ist optional erhältlich). Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch das Akku-Pack. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung ✉.

Technische Daten

- | Matratzenbreite: 100 cm
- | Matratzenlänge: 200 / 210 / 220 cm
- | Betthöhe: 40 - 80 / 34 - 78 cm
- | Max. Patientengewicht: 180 kg
- | Sichere Arbeitslast: 220 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Rotadorm Max (Betthöhe 40 - 80 cm)
- | Rotadorm Max Low (Betthöhe 34 - 78 cm)
- | Liegeflächenabmessung: 100 x 200 cm (SI-021-1)
- | Liegeflächenabmessung: 100 x 210 cm (SI-021-21)
- | Liegeflächenabmessung: 100 x 220 cm (SI-021-22)
- | Drehrichtung: links
- | Drehrichtung: rechts
- | Abdeckung für Handgriff-Aufnahme (SI-011.80.725)
ermöglicht ein seitliches Aussteigen aus dem Bett
- | Akku-Pack mit Ladekreislauf (SI-011.85.050)
Sicherheitsausstattung für Stromausfall - alle elektrischen Funktionen können somit auch ohne Netzspannung in die Ausgangsposition zurückgefahren werden