

Levatrain

Das funktionale und preiswerte Stehgerät

Elektrisches
Gurtsystem
mit premium
Linearantrieb

Pneumatisch
unterstützte
**Tischhöhen-
verstellung**

**Edelstahl-
Handläufe**
parallel höhen-
verstellbar

Max.
**Patienten-
gewicht**
120 kg



◀ Die integrierte Tischhöhenverstellung ist dank Gasfederunterstützung sehr leichtgängig.

▶ Die serienmäßig ausschwenkbaren Hinterräder erleichtern das Einfahren mit dem Rollstuhl in das Stehgerät. Vor allem bei Rollstühlen mit breiteren Sitzen ist dies von Vorteil.



Das **Levatrain** Stehgerät besitzt ein integriertes elektrisches Gurtsystem und erleichtert den Aufstehvorgang bei gleichzeitig stabilem Halt. Der trapezförmige Grundrahmen sowie die ausschwenkbaren Hinterräder ermöglichen die Nutzung des Stehgeräts auch für Patienten mit breiteren Rollstühlen.

Produktdetails

- | Tischausschnitt mit ergonomischem Bauchpolster
- | Fußplatte mit Fersenschalen und Zehenfixierung
- | Elektrisches Gurtsystem
- | Patientenhaltegurt mit Boden (Größe S, M oder L)
- | Stabile Stahlrohrkonstruktion in Blau
- | Verbreiterbarer Zugangsbereich
- | Holzelemente aus Multiplex mit hochfester HPL-Beschichtung
- | Ausschwenkbare Hinterräder
- | 4 Doppellenkrollen mit Totalfeststellung



Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung des Stehgerätes. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch einen 4-teiligen Tischrand aus Buche. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .


Technische Daten

- | Gesamtlänge: 100 – 103 cm
- | Tischbreite: 64 cm
- | Gesamtbreite: 73 – 78 cm
- | Tischlänge: 58 cm
- | Holmhöhe: 80 – 100 cm
- | Patientengewicht: 120 kg
- | Holmbreite: 49 cm
- | Min./Max. Patientengröße: 140 – 200 cm
- | Tischhöhe: 100 – 132 cm


Extra Ausstattung / Optionales

- | Patientenhaltegurt mit Boden (5 cm), Größe „S“ (KR-608-X)
- | Patientenhaltegurt mit Boden (5 cm), Größe „M“ (KR-607-X)
- | Patientenhaltegurt mit Boden (5 cm), Größe „L“ (KR-606-X)
- | Boden Patientenhaltegurt: 10 cm (Aufpreis)
- | Noppenbelag für Patientenhaltegurt (Aufpreis)
- | Sitzhose für Patientenhaltegurt (Aufpreis)
- | Haltestange mit Hüftpelotten (KR-620-X)
- | Oberkörperpelotte inkl. Kopfstütze (KR-631-X)
(Haltestange zur Befestigung benötigt)
- | Tischplatte horizontal verschiebbar (KR-710-X)
- | Brustpelotte 15 cm (KR-744-X)
- | Brustpelotte 25 cm (KR-745-X)
- | Kniepolster extra weich (KR-801-X)
- | Fersenklettbander (KR-805-X)
- | Akkubox (KR-703-X)
- | Tischrand Buche, 4-teilig (KR-602-X)
- | Fußplattenerhöhung
- | Sonderfarben möglich (RAL Farbsystem)


Extra Ausstattung / Optionales

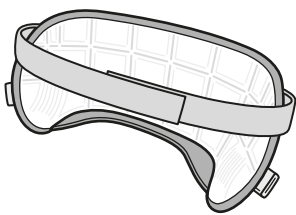


**Patientenhaltegurt
mit Boden (5 cm)**

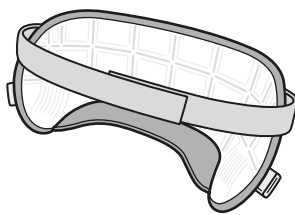


**Patientenhaltegurt
mit Boden (10 cm)**

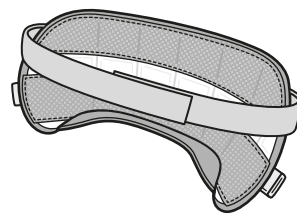


**Patientenhaltegurt
mit Noppen**

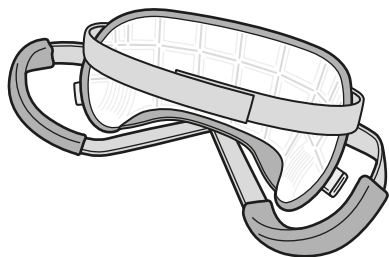


**Patientenhaltegurt
mit Sitzhose**

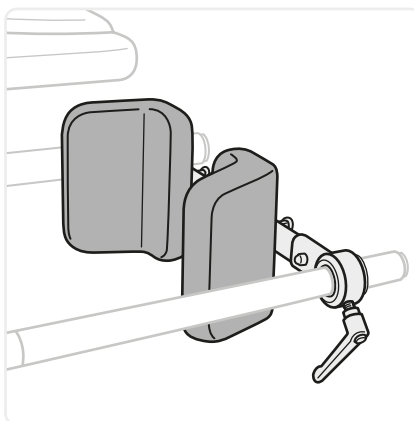


**Haltestange
mit Hüftpelotten**

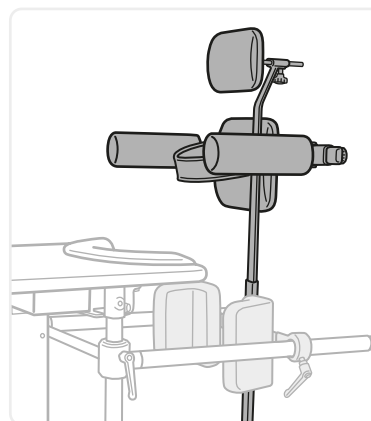


**Oberkörperpelotte
inkl. Kopfstütze**

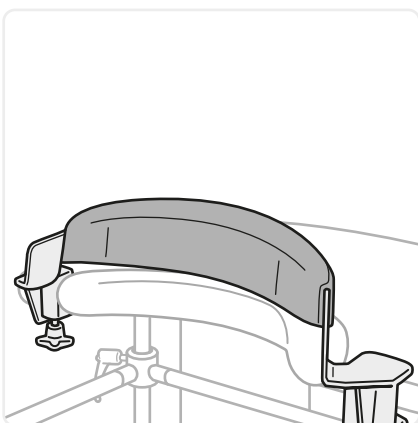

Brustpelotte 15 cm

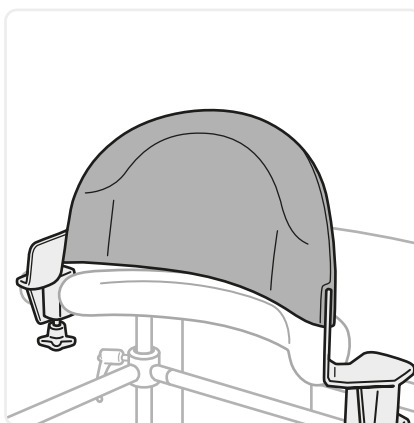


Brustpelotte 25 cm

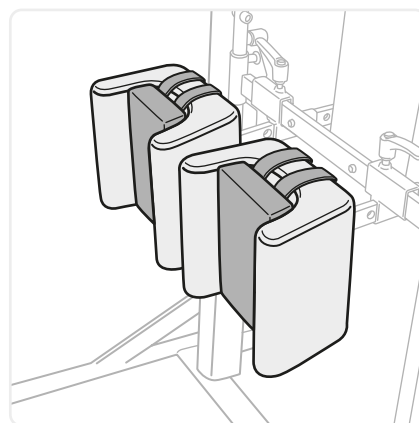


**Kniepolster
extra weich**




Fersenklettbander

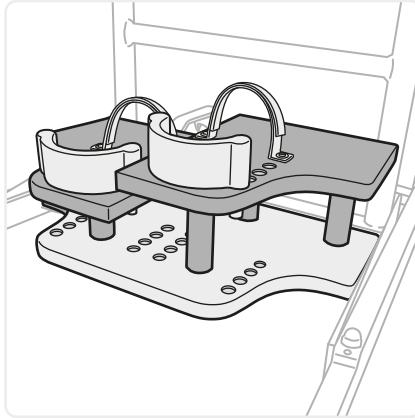


Fußplattenerhöhung

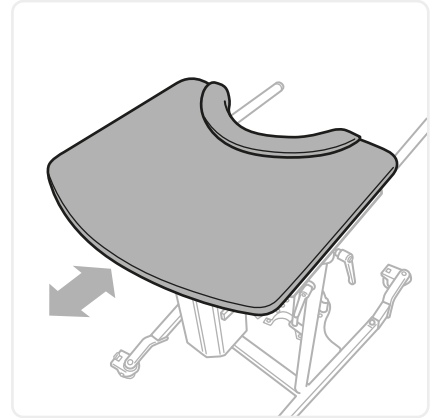


**Tischplatte
horizontal verschiebbar**

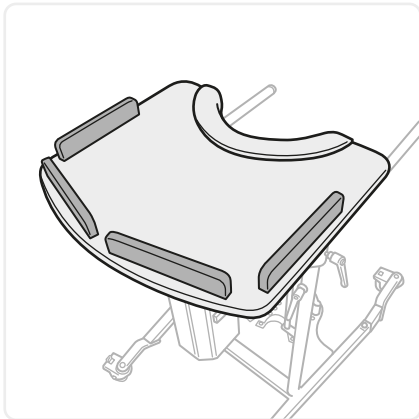

**Tischrand Buche
4-teilig**

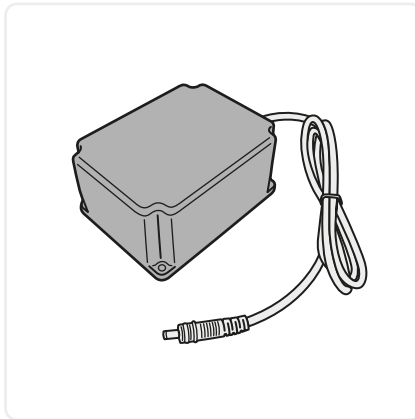

Akkubox

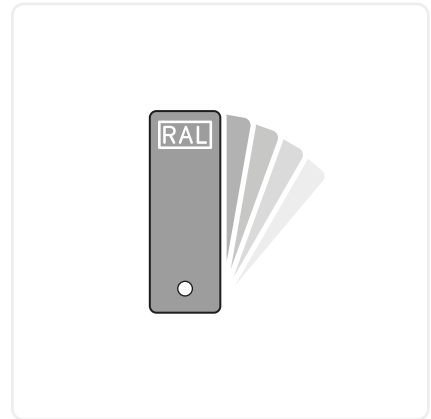

**Sonderfarben möglich
(RAL Farbsystem)**



**Produktanfrage
Levatrain**

ISKO Koch GmbH · Egerländer Str. 28 · 95448 Bayreuth
Tel +49 921 150845-0 · info@iskomed.de · www.iskomed.de